
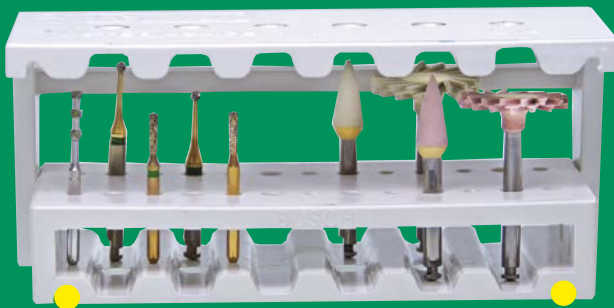


# All in one

## STERI-SAFE<sub>wave</sub>

Der Bohrerständer  
überzeugt:

- Platz für 14 FG- und 12 WST-Instrumente
- offene Konstruktion für eine bessere Durchströmung im Sinne einer optimalen und effektiven Wiederaufbereitung
- desinfizierbarer und sterilisierbarer Medical Kunststoff für alle praxisrelevanten Wiederaufbereitungsverfahren
- validierte zertifizierte Reinigungsfähigkeit
- der Sicherungsbügel im "wave-Design" schützt vor Herausfallen
- Farbkodierung und rutschfester Stand durch Silikonbänder in 5 unterschiedlichen Farben

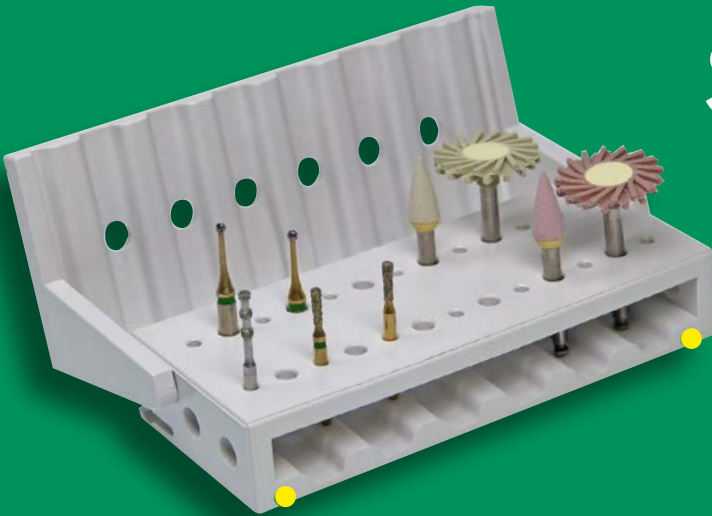


**Pusch**<sup>®</sup>

*There is no substitute for quality*

universell

Die innovative wave-Konstruktion dieses modernen sterilisierbaren Bohrerständers ermöglicht das sichere und **gleichzeitige Handling von FG und WST** Instrumenten in Standardlängen, vor, während und nach der Patientenbehandlung. Von der Präparation bis zur abschließenden Politur haben Sie immer Ihre Instrumente beider Schaftarten griffbereit und übersichtlich in diesem Bohrerständer kombiniert.

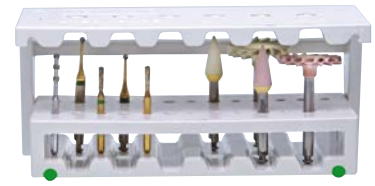

Abmessung: L 76mm x B 30mm x H 33mm

Platz für:

- max. 14 FG-Instrumente mit einer Gesamt-Länge von 19 bis 24mm
- max. 12 Wst-Instrumente mit einer Gesamt-Länge von 22 bis 30mm


sicher

Der **Sicherungsbügel** arriert im geschlossenen Zustand und sichert so alle Instrumente gegen Herausfallen, natürlich auch im Wiederaufbereitungskreislauf. Zudem wird der Verschleiß der Arbeitsteile reduziert, da diese sich nicht berühren und gegenseitig schädigen. Klappen Sie den Sicherungsbügel nach hinten, um die gewünschten Instrumente zu entnehmen.



systematisierbar

Der STERI-SAFEwave bietet Ihnen die Möglichkeit einer **Farbkodierung**. Die in 5 Farben erhältlichen Silikonbänder haben einen doppelten Nutzen. Neben der Farbkodierung sichern sie einen rutschfesten Stand.

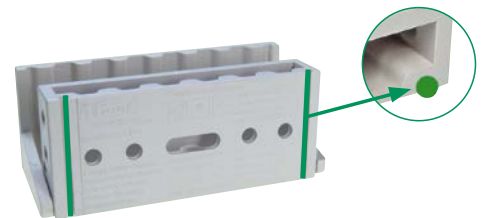

Art.-Nr. 5773-03 mit Silikonband grün



Ersatz Silikonbänder (Farbcode FC)

Art.-Nr.: FC 01 rot



Art.-Nr.: FC 03 grün



Art.-Nr.: FC 02 gelb



Art.-Nr.: FC 04 blau



Art.-Nr.: FC 05 schwarz



- Art.-Nr.: 5773-01 Silikonband rot
- Art.-Nr.: 5773-02 Silikonband gelb
- Art.-Nr.: 5773-03 Silikonband grün
- Art.-Nr.: 5773-04 Silikonband blau
- Art.-Nr.: 5773-05 Silikonband schwarz

hygienisch

Im Rahmen des Wiederaufbereitungsprozesses profitieren Sie zum einen vom **desinfizier- und sterilisierbaren Medical Kunststoff** des STERI-SAFEwave und zum anderen von der Möglichkeit, ihn aufgrund seiner Abmessung in bestehende Hygienekonzepte einzubinden (Sterilgutverpackung/ - Container). Die offene Konstruktion des STERI-SAFEwave unterstützt eine bessere Durchströmung im Sinne einer optimalen und effektiven Wiederaufbereitung.



desinfektionsmittelbeständig



autoclavierbar bei 134°C



thermodesinfektorbeständig



heißluftsterilisierbar bei 180°C



ultraschallbeständig



chemiclavierbar

validiert

Die **Reinigungsfähigkeit** des STERI-SAFEwave in Kombination mit den darin einbezogenen vorkontaminierten BUSCH Medizinprodukten wurde durch ein externes Institut **validiert**.



**BUSCH & CO.** GmbH & Co. KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

www.busch.eu  
mail@busch.eu  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter [www.busch.eu](http://www.busch.eu)

